

# Combat Application Tourniquet



**Notice:** When applied in accordance with direction, this tourniquet is a safe and effective device for controlling life-threatening extremity bleeding. If you cannot be sure or cannot take the additional time to examine where the bleeding is coming from based on the situation, the tourniquet can be effectively applied over clothing as high on the arm or leg as possible.

The tourniquet **must not be applied over solid objects within the clothing**. **As soon as the situation permits**, the injured limb should be evaluated and the tourniquet re-positioned 2-3 inch above the injury directly to the skin.



1. Apply tourniquet proximal to the bleeding site and place the wounded limb through the band loop.



2. Pull the band very tight and fasten it back on itself



4. Twist the rod until bright red bleeding stops.



3. Adhere the band around the limb.



5. Place the rod inside the clip and lock.



6. Adhere the band over the rod, for small extremities, continue to adhere the band around the extremity and over the windlass rod.



7. Secure the rod and band with strap, adhere it to the opposite hook on the windlass clip. Record time of application.


## Warning:

Please read entire instruction for use prior to using this product. Inappropriate application can result in serious injury or loss of limb.

## Symbols definition/Définition des Symboles

<b>REF</b>	Product reference Référence produit	<b>LOT</b>	Batch number Numéro de lot
	Manufacturing date Date de fabrication		Manufacturer Fabricant
<b>CE</b>	CE Marking Marquage CE		Keep dry Garder au sec
	Read instructions before use Lire la notice avant utilisation		Throw away A jeter dans une poubelle
<b>MD</b>	Medical device Dispositif médical		Low density polyethylene Polyéthylène basse densité
	Do not use if damage on packaging Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé		Importer Importateur
	Latex free Sans latex		Distributor Distributeur
	Avoid direct sunlight Évitez toute exposition directe au soleil	<b>EC REP</b>	European Authorized Representative Représentant européen autorisé

## Garrot Tourniquet Tactique

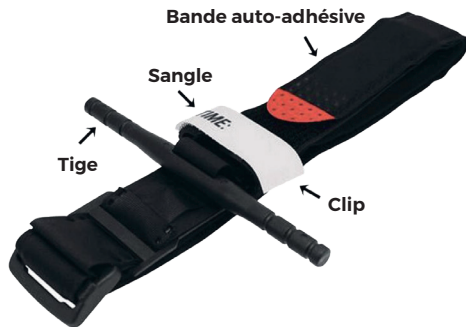

**AVIS :** Lorsqu'il est appliqué conformément aux instructions, ce garrot est un dispositif sûr et efficace pour contrôler les hémorragies des extrémités menaçant le pronostic vital. Si vous ne pouvez pas être sûr ou ne pouvez pas prendre de temps supplémentaire pour examiner l'origine du saignement en fonction de la situation, le garrot peut être appliqué efficacement par-dessus les vêtements aussi haut que possible sur le bras ou la jambe. Le garrot ne doit **PAS être appliqué sur des objets durs à l'intérieur des vêtements. Dès que la situation le permet**, le membre blessé doit être évalué et le garrot repositionné à 5-7 cm au-dessus de la blessure directement sur la peau.



1. Appliquer le garrot à proximité de l'endroit de l'hémorragie et placer le membre blessé à l'intérieur de la bande.



2. Tirer très fort sur la bande et l'attacher sur elle-même à l'aide de la boucle.



4. Tourner la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.



3. Faire adhérer la bande autour du membre.



5. Placer la tige à l'intérieur du clip pour la verrouiller.



6. Coller la bande sur la tige. Pour les membres fins, continuer à coller la bande autour de l'extrémité et sur la tige.



7. Fixer la tige et la bande à l'aide de la sangle, en la faisant adhérer au crochet opposé du clip. Enregistrer l'heure de l'application du garrot.

### Attention:

Veillez lire l'intégralité du mode d'emploi avant d'utiliser ce garrot. Une utilisation inappropriée peut entraîner des blessures graves ou la perte d'un membre.



**Shenzhen TMI Medical Supplies Co., Ltd**  
4F, Bldg. 1, Area 2, HuangMaBu Industrial District,  
XiXiang, Bao'an District, Shenzhen | CHINA



**SUNGO Europe B.V.**  
Olympisch Stadion 24,  
1076DE Amsterdam | NETHERLANDS



**GSH**  
30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix en Provence | FRANCE  
[www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)