

Manuel d'utilisation Civière de Relevage

Réf. SBRAN13J



I. Descriptif :

Dimension du produit déplié (L x l x H) : 162 x 45 x 7 cm
Dimension de l'emballage : 165x 47 x 9cm
Poids net: 8kg/ Poids brut: 10kg
Capacité de charge : maximum 159kg

II. Recommandation d'utilisation :

Pour le transfert des patients fracturés et sérieux. Aux deux extrémités de la civière, une charnière est fixée au milieu, ce qui permet de mettre la civière en deux parties, charnière facile à verrouiller et déverrouiller. La longueur de la civière peut être ajustée pour correspondre à la longueur du corps du patient, qui peut alors facilement être chargé dans une ambulance.

III. Précautions d'utilisation :







Lors du transport de patients, il est essentiel de verrouiller correctement les sangles de sécurité.
Ne pas tordre la civière lors de sa manipulation

IV. Entretien :

Nettoyage avec un désinfectant de surface.
Veiller régulièrement à ce qu'aucune partie soit manquante.


V. Stockage et Transport :

Entreposer dans un endroit à l'abri de l'humidité, ce qui pourrait entraîner la corrosion du produit.

	Fabricant
	Représentant autorisé dans l'union européenne
	Importateur
	Distributeur
REF	Référence Holtex
LOT	Numéro de lot
	Date de fabrication
	Dispositif médical



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,
Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

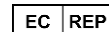

SUNGO EUROPE B.V.
Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel
The Netherlands

NU_SBRAN13J_1V5_20240207

User Manual Scoop Stretcher Réf. SBRAN13J



I. Technical parameters:

Product size (L x W x H): 162 x 45 x 7 cm
 Packing size: 165 x 47 x 9cm
 Net size: 8kg/ Growth size: 10kg
 Load bearing: less than 159kg

II. How to use:

For the transfer of fractured and serious patients. At both ends of the stretcher, a hinge is fixed in the middle, which allows to put the stretcher in two parts, hinge easy to lock and unlock. The length of the stretcher can be adjusted to match the length of the patient's body, which can then easily be loaded into an ambulance.

III. Cautions:





When carrying patients with this stretcher, be sure to lock tightly the fender locking device & fasten the safety belt for safety sake. In general operation, be careful not to torn out the stretcher surface.

IV. Maintenance:

Keep clean as routine (incl. sterilization).
 Often check if any parts loose or not.


V. Storage & transportation:

Store this product in the place of damp proof & non-corrosion.

	Manufacturer
EC REP	Authorised representant of the European Union
	Importer
	Distributor
REF	Holtex reference
LOT	Lot number
	Manufacturing date
MD	Medical device



ZHANGJIAGANG XIEHE Medical Apparatus & Instruments Co.,Ltd.
 NO.7th, Middle Xinzha Road, Sigang Village,
 Yangshe Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province 215600, China

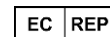

SUNGO EUROPE B.V.
 Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
 2909VA Capelle aan den IJssel
 The Netherlands